

たよレールSOTOE

Webで詳細図面をご覧ください。

介護
保険 貸与

たよレールシリーズ

SOTOE ソトでも使える 置くだけ手すり。

たよレールソトエ

- 屋内・屋外どちらでも使える据置式手すりです。
- オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。

※スリム型だけで連結させることはできません。

- 手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。

- ベースプレートはすべり止め加工付です。

[BZK-01/02/03/04 共通仕様]

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被膜、調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン●性能:抗菌仕様(手すり部)

※組立てには六角棒スパナ(呼び4)が別途必要です。

階段の踏み面など狭いスペースにも使えるスリム型

230mm



標準型(BZK-01/02)

3梱包

重量:約17.8kg

マツ六

たよレールSOTOE片手すり

0404-2216

BZK-01

1台

TAIS 01265-000248

手すりは
プレート中央
でもOK!



スリム型(BZK-03/04)

※スリム型は単体で使用できません。

3梱包

重量:約14.7kg

マツ六

たよレールSOTOE片手すり

0404-2253

BZK-03

1台

TAIS 01265-000259

手すりは
プレート中央
でもOK!



たよレールSOTOE
(標準型・スリム型)を
わたレールEKで連結



POINT!



片手すりと両手すりを連結使用しても、問題ありません！



POINT!




連結する手すりの高さが違ってても問題ありません！



POINT!



連結の台数に制限はありません。

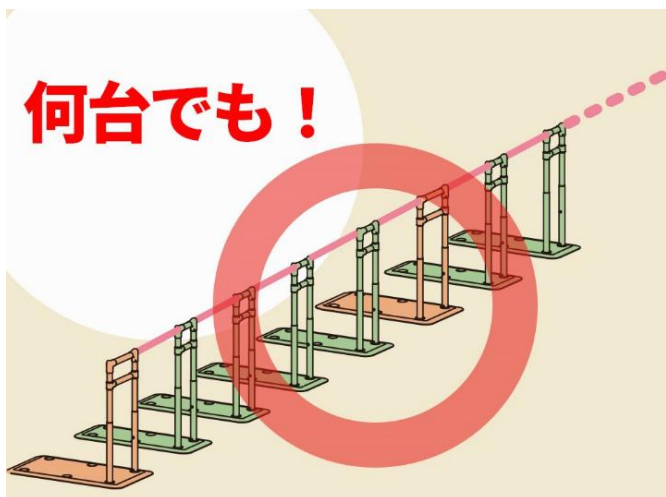

POINT!




車が乗り上げたり、通行する箇所には、ご使用いただけません。



POINT!



スリム型単独やスリム型だけの連結使用はできません。

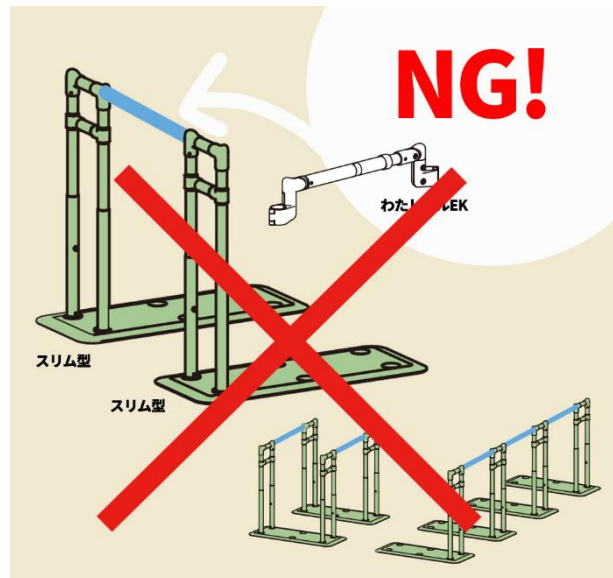

POINT!



単独で使用する場合は、必ず段差の下に置いて使用してください。

